


# VORTEX

## Technologia Vortex

Innowacyjna, okrągła komora portu została zaprojektowana tak, aby wprowadzany do niej płyn wypełniał całą powierzchnię komory, eliminując tym samym martwe strefy, w których może gromadzić się osad. Laminarny- wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej, charakteryzuje technologię vortex, dostępną tylko w portach Smart Port. Zmniejsza to ryzyko zakażenia, redukuje liczbę komplikacji i prowadzi do efektywnego oczyszczenia całej komory portu.

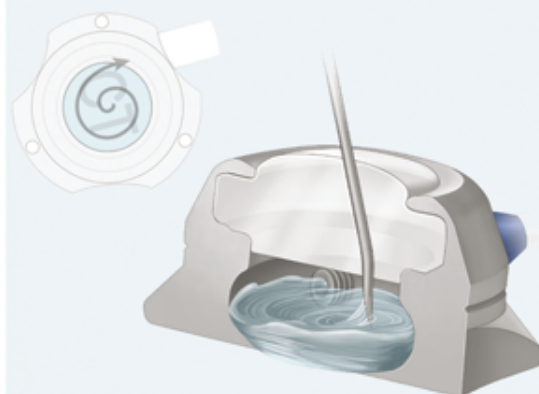

Smart Port wyróżniają unikalne akcesoria zawarte w zestawie do implantacji, które powstały w oparciu o innowacyjną technologię firmy AngioDynamics.

1. Wygodna igła do nakłucia przezskórnego z krótkim ostrzem, ułatwiającą identyfikację naczynia.
2. Prowadnica Seldingera wyposażona w znaczniki długości.
3. Elastyczny i wytrzymały cewnik o doskonałej widoczności w RTG.
4. Cewnik o optymalnej długości, zapewniającej wygodne przeprowadzenie zabiegu.
5. Oznaczenie długości na cewniku naniesione trwale co 1cm.
6. Łącznik luer do przepłukiwania cewnika podczas zabiegu.
7. Wygodne, bezpieczne i pewne połączenie cewnika z komorą portu.
8. Kształt komory portu zbliżony do wycinka stożka, ułatwiający jego wprowadzenie do kieszeni podskórnej oraz zmniejszający napięcie skóry.
9. Nacięcia w obudowie ułatwiające stabilny uchwyt komory portu.
10. Wygodny i bezpieczny tunelizator.
11. Zestaw do przetoczeń z igłą Hubera w komplecie.

